

# psyprax in einem Netzwerk installieren

# Impressum

Herausgeber: psyprax GmbH, Landsberger Str. 308, 80687 München

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgerechten Verwendung, falsch verstandenen Inhalten oder der Verwendung von veralteten Informationen entstehen.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Angaben mit persönlichen oder firmenbezogenen Daten wurden speziell für dieses Dokument erstellt. Sollten Ähnlichkeiten mit realen Personen und/oder Firmen bestehen, sind diese rein zufällig.

Verwendete Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

Copyright psyprax GmbH: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der Übersetzung, sind vorbehalten.

## Sehr geehrte psyprax-Nutzer\*,

sollten weitere Fragen rund um das Programm aufkommen, steht Ihnen unser Support-Team gern zu folgenden Zeiten zur Verfügung:

| Wochentag             | Öffnungszeiten   |
|-----------------------|------------------|
| Montag bis Donnerstag | von 8 bis 18 Uhr |
| Freitag               | von 8 bis 17 Uhr |

Bei Bedarf erreichen Sie uns auch per E-Mail unter folgender Adresse:

[info@psyprax.de](mailto:info@psyprax.de)

\*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in allen Texten das generische Maskulinum. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit dies für die Aussage erforderlich ist. Dieses Vorgehen ist wertfrei.

# Inhaltsverzeichnis


|       |  |   |
|-------|--|---|
| 1     | Netzwerk installieren .....              | 1 |
| 1.1   | Allgemeine Informationen .....           | 1 |
| 1.2   | Voraussetzungen .....                    | 1 |
| 1.3   | psyprax auf dem Server einrichten .....  | 2 |
| 1.3.1 | Download der Demo-Version .....          | 2 |
| 1.3.2 | Installation auf dem Server .....        | 3 |
| 1.3.3 | Installation an den Arbeitsplätzen ..... | 7 |



# 1 Netzwerk installieren

## 1.1 Allgemeine Informationen

Die Installation von psyprax in ein bestehendes Netzwerk ist problemlos möglich. Voraussetzung dafür ist, dass der Server, auf welchem die Installation stattfinden soll, über eine feste IP-Adresse (IPv4) verfügt. Die IP-Adresse kann in den meisten Fällen in den Einstellungen des Routers konfiguriert bzw. eingesehen werden. Sollten Fragen bzw. Unklarheiten bzgl. der IPv4-Adresse des Servers bestehen, sind diese im Vorfeld der Installation unbedingt mit dem zuständigen IT-Fachpersonal (Praxis-IT-Techniker) zu besprechen. Die psyprax-Installation wird direkt auf Ihrem Server durchgeführt. Bedenken Sie bitte, dass der Server eingeschaltet sein muss, um psyprax nach erfolgreicher Netzwerkinstallation auf anderen Rechnern zu nutzen.

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Hinweis</b>  |
|   | <p>Um psyprax nach erfolgreicher Netzwerkinstallation auf mehreren Rechner des Netzwerks nutzen zu können, muss der Server stets in Betrieb sein.</p> |

## 1.2 Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Netzwerkinstallation problemlos umsetzen zu können:

- Server und Client müssen im Netzwerk miteinander kommunizieren können. Dafür in den Netzwerkeinstellungen die folgenden Optionen aktivieren:

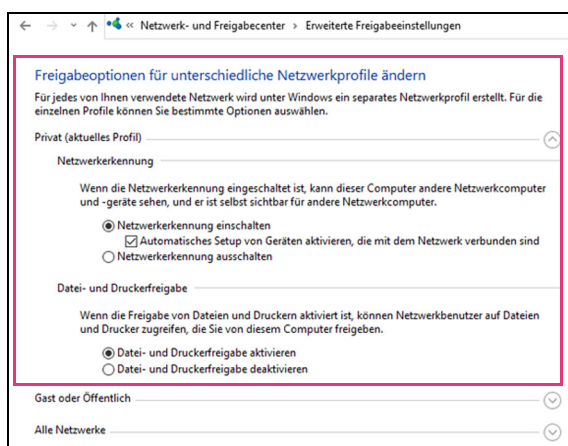


Abbildung 1: Netzwerkeinstellungen

## 1.3 psyprax auf dem Server einrichten

### 1.3.1 Download der Demo-Version

Im Vorfeld der Installation muss die Demo-Version von psyprax heruntergeladen werden. Dafür wie folgt vorgehen:

1. Aktuelle Demo-Version des Programms unter folgender Adresse herunterladen:

<https://www.psyprax.de/downloads>

| Name  | Dateigröße | Download                 |
|---|------------|--------------------------|
| PsyPrax Demo-Version<br>Achtung: Nach der Installation unbedingt ein Internet Update durchführen über Datei -> Internet Update. | 1,1 GB     | <a href="#">Download</a> |
| Downloader-Programm<br><a href="#">Anleitung Downloader</a>   | 642 KB     | <a href="#">Download</a> |
| PsyPrax MacOS Downloader (64-Bit)   | 4 MB       | <a href="#">Download</a> |
| PDF Reader für Anzeige der Ergebnisse des KBV-Prüfmodul   | 8-20 MB    | <a href="#">Download</a> |
| KBV-Prüfassistent   | 18 MB      | <a href="#">Download</a> |
| PsyPrax32 ClientSetup (Netzwerk)  | 1,1 GB     | <a href="#">Download</a> |

Abbildung 2: Demo-Version herunterladen

2. Nach einem Klick auf die Schaltfläche „Download“ wird die Installationsdatei mit dem Namen „pp32setup.exe“ auf das System heruntergeladen. Werden die Windows-Standard Einstellungen genutzt, speichert das System Downloads im Ordner „Downloads“.

## 1.3.2 Installation auf dem Server

Um die Demo-Version auf dem Server zu installieren, wie folgt vorgehen:

1. Windows-Explorer öffnen und zum Ablageort für Downloads navigieren.
2. Datei „pp32setup.exe“ doppelt anklicken, um die Installation zu starten.
3. Sicherheitsabfrage der Systemsteuerung bestätigen.

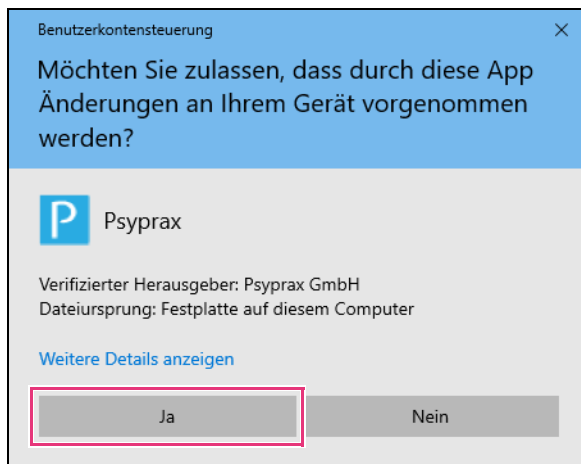


Abbildung 3: Sicherheitsabfrage der Systemsteuerung

4. Eine Abfrage der Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Menüpunkt „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ auswählen und mit Schaltfläche „Weiter“ bestätigen.

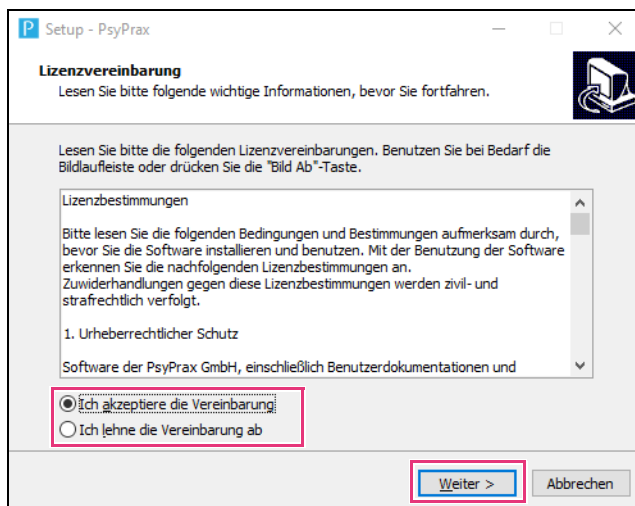



Abbildung 4: Abfrage Lizenzvereinbarung

5. Im folgenden Fenster ggf. das Installationsverzeichnis (1) sowie den Name des Programms (2) anpassen. Abschließend mit Schaltfläche „Weiter“ bestätigen.

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Hinweis</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Änderung des Installationsverzeichnis kann dazu führen, dass der Support das Verzeichnis nicht ohne Weiteres finden kann.</li> <li>• Eine Anpassung des Namens empfiehlt sich speziell für den Fall, dass bereits eine Version von psyprax auf dem System installiert ist oder war. In diesem Fall sollte der reguläre Name durch einen eindeutigen Zusatz erweitert werden. So kann die aktuelle Version bspw. einem Nutzer zugeordnet werden und Datenverlust durch Überschreiben wird verhindert.</li> </ul> |

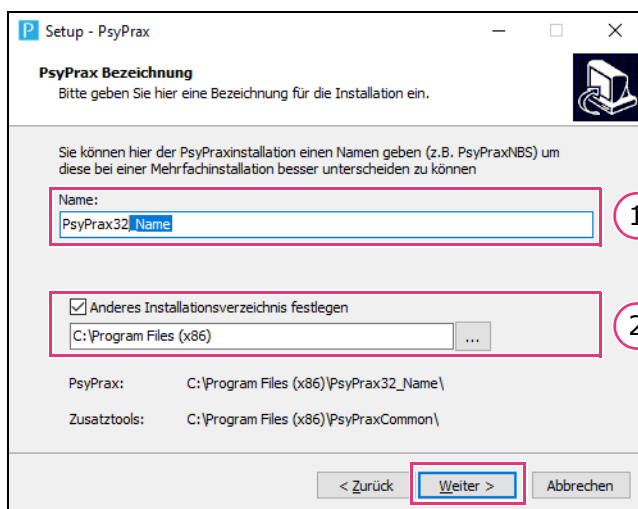


Abbildung 5: Installationsverzeichnis und Programmname anpassen

6. Eine Abfrage wird angezeigt, in welcher der Umfang der zu installierenden Komponenten angegeben wird. Hier die entsprechende Netzwerkinstallation auswählen und mit Schaltfläche „Weiter“ bestätigen. Folgende Varianten stehen zu Auswahl:

| Variante der Installation   | Beschreibung   |
|---|--|
| Netzwerkinstallation: PC ist Server und Arbeitsplatz  | Der Rechner, auf welchem die Hauptinstallation durchgeführt wird, ist zugleich Server und Arbeitsplatz.            |
| Netzwerkinstallation: PC ist nur Server   | Der Rechner, auf welchem die Hauptinstallation durchgeführt wird, ist ausschließlich Server und kein Arbeitsplatz. |
| Detaillierte Informationen zur Installation von Netzwerkversionen sind der entsprechenden Anleitung zu entnehmen, siehe <a href="https://www.psyprax.de/hilfecenter/">https://www.psyprax.de/hilfecenter/</a> |  |



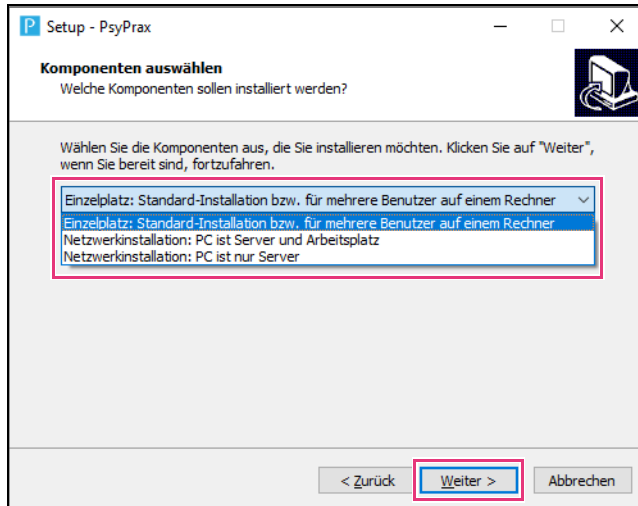


Abbildung 6: Umfang der Installation

7. Verfügt der Praxis-Server über mehrere IP-Adressen, wird abgefragt, über welche IP-Adresse die Arbeitsplatz-Rechner zu erreichen sind. In den meiste Fällen entspricht dies der LAN-Verbindung des Servers. Auswahl mit Schaltfläche „Weiter“ bestätigen

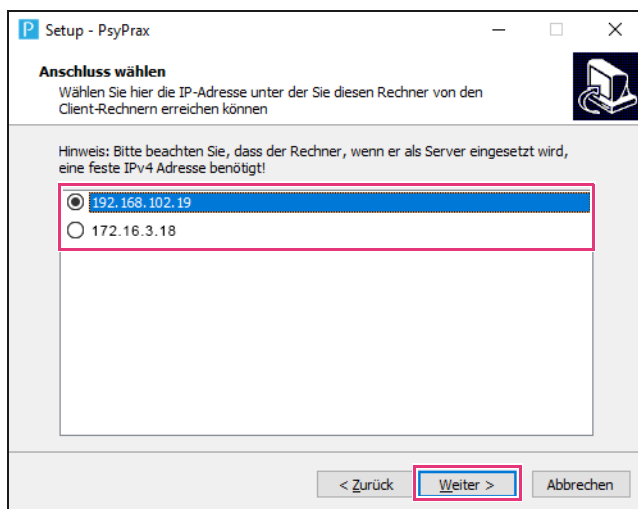


Abbildung 7: IP-Adresse wählen

- Ein Fenster wird angezeigt, in welchem die Voreinstellungen der Installation überprüft werden können. Schaltfläche „Installieren“ anklicken, um die Installation zu starten.

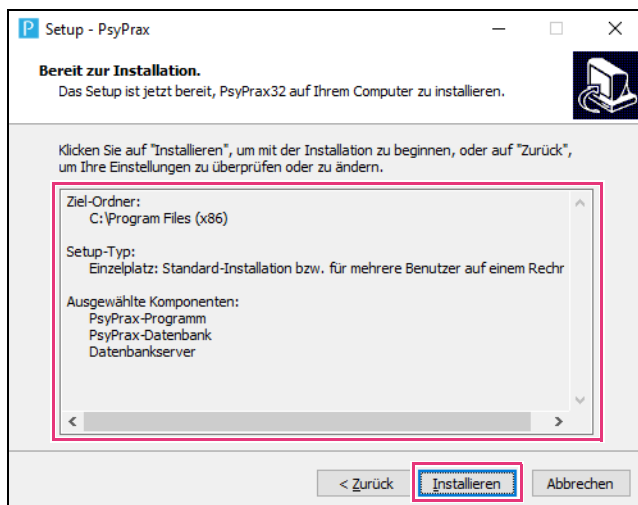


Abbildung 8: Installation überprüfen und starten

- Das Programm wird installiert. Der Fortschritt der Installation wird mittels eines grünen Balkens dargestellt.

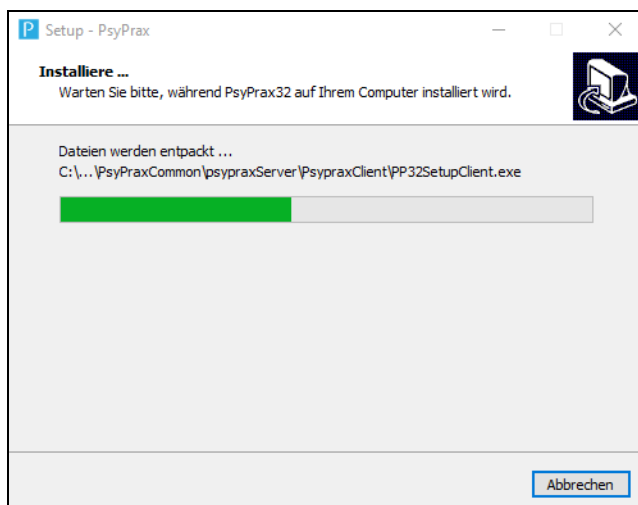


Abbildung 9: Installationsfortschritt

10. Nach erfolgreicher Installation wird das folgende Fenster angezeigt. Schaltfläche „Fertigstellen“ anklicken, um die Installation abzuschließen.

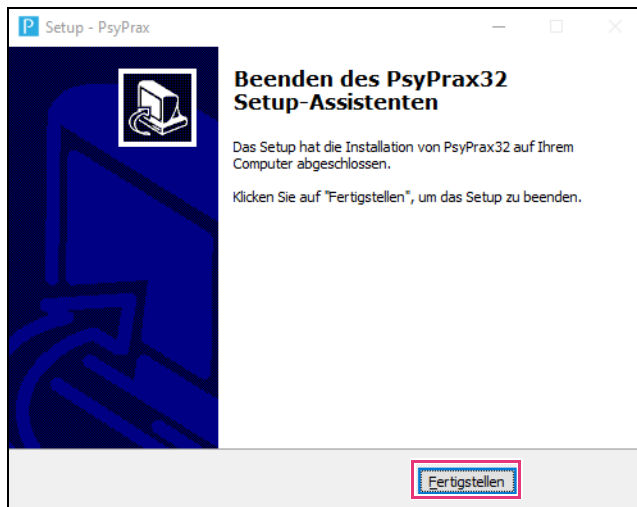


Abbildung 10: Installation fertigstellen

Die Installation ist abgeschlossen. Um das Programm schnell und bequem starten zu können, wurde eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt.

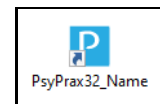


Abbildung 11: Desktop-Verknüpfung

### 1.3.3 Installation an den Arbeitsplätzen

Nachdem psyprax erfolgreich auf dem Server installiert wurde, können die einzelnen Versionen auf den Arbeitsplatz-Rechnern eingerichtet werden. Dafür wie folgt vorgehen:

1. Am Arbeitsplatz den Windows-Explorer öffnen und in das entsprechende Netzwerk navigieren.

2. Im folgenden Fenster Anmeldeinformationen des Servers eingeben und mit Schaltfläche „OK“ bestätigen.

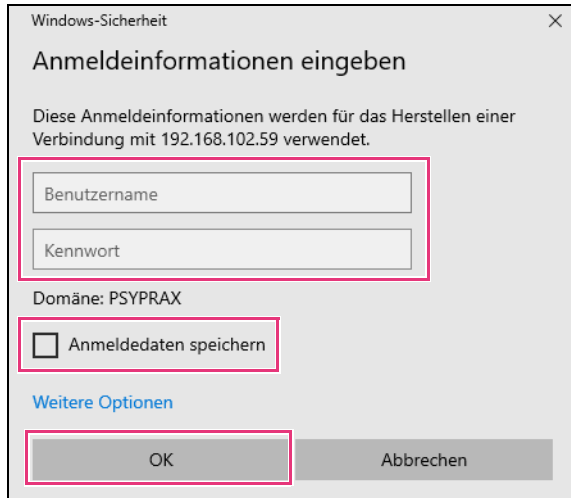


Abbildung 12: Anmeldung im Netzwerk

3. Ordner „PsyPraxClientPsyPrax32\_[Name\_der\_Installation]“ öffnen.

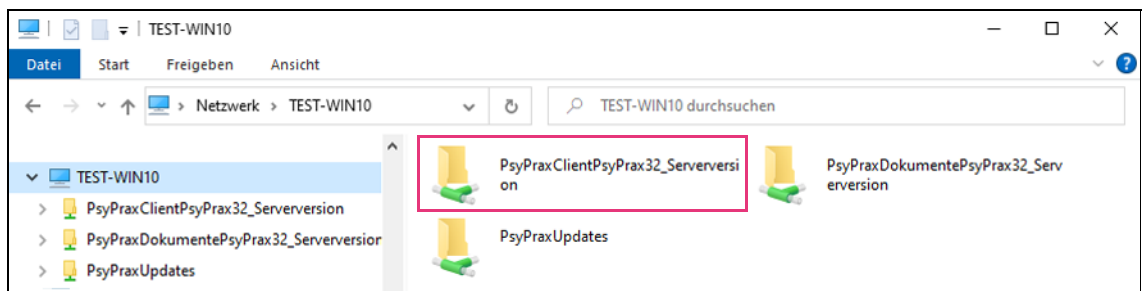


Abbildung 13: Netzwerk

4. Datei „PP32SetupClient.exe“ doppelt anklicken, um die Installation der lokalen psyprax-Version zu starten.

5. Sicherheitsabfrage der Systemsteuerung bestätigen.

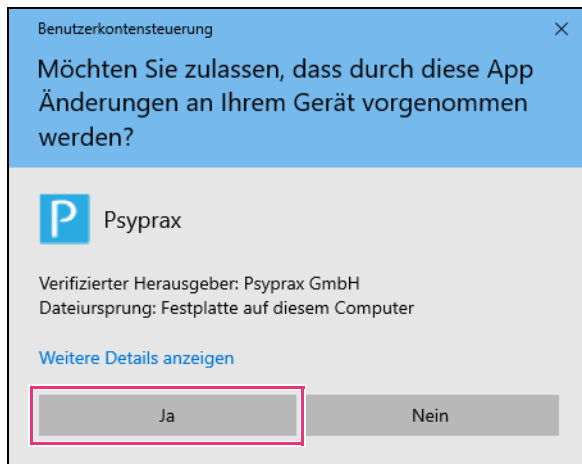


Abbildung 14: Sicherheitsabfrage der Systemsteuerung

6. Eine Abfrage der Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Menüpunkt „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ auswählen und mit Schaltfläche „Weiter“ bestätigen.

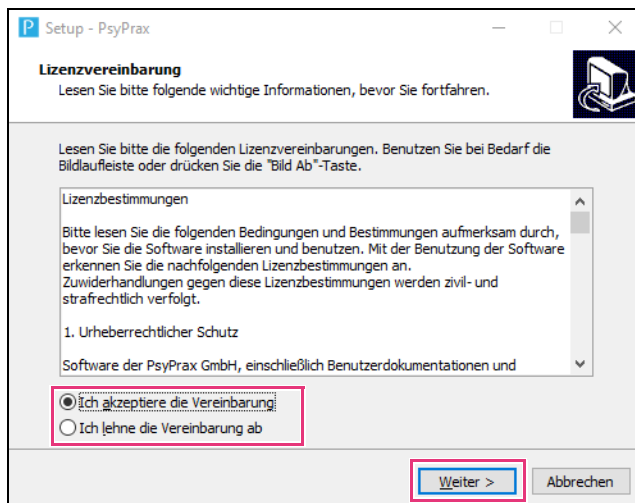



Abbildung 15: Abfrage Lizenzvereinbarung

7. Im folgenden Fenster ggf. das Installationsverzeichnis (1) sowie den Name des Programms (2) anpassen. Abschließend mit Schaltfläche „Weiter“ bestätigen.

|   |  |
|---|--|
|  | <h3>Hinweis</h3>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Änderung des Installationsverzeichnisses kann dazu führen, dass der Support das Verzeichnis nicht ohne Weiteres finden kann.</li> <li>• Eine Anpassung des Namens empfiehlt sich speziell für den Fall, dass bereits eine Version von psyprax auf dem System installiert ist oder war. In diesem Fall sollte der reguläre Name durch einen eindeutigen Zusatz erweitert werden. So kann die aktuelle Version bspw. einem Nutzer zugeordnet werden und Datenverlust durch Überschreiben wird verhindert.</li> </ul> |

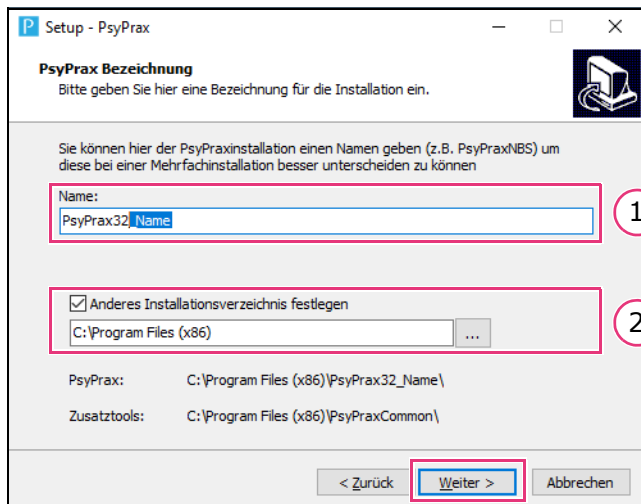


Abbildung 16: Installationsverzeichnis und Programmname anpassen (Beispieldarstellung)

- Ein Fenster wird angezeigt, in welchem die Voreinstellungen der Installation überprüft werden können. Schaltfläche „Installieren“ anklicken, um die Installation zu starten.

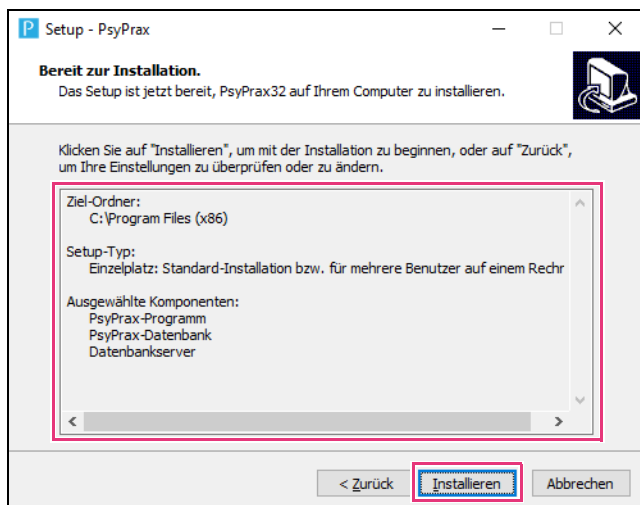


Abbildung 17: Installation überprüfen und starten (Beispieldarstellung)

- Das Programm wird installiert. Der Fortschritt der Installation wird mittels eines grünen Balkens dargestellt.

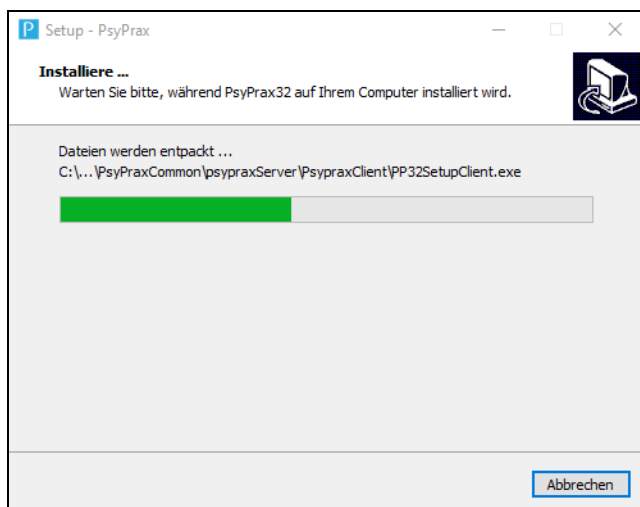


Abbildung 18: Installationsfortschritt (Beispieldarstellung)

10. Nach erfolgreicher Installation wird das folgende Fenster angezeigt. Schaltfläche „Fertigstellen“ anklicken, um die Installation abzuschließen.

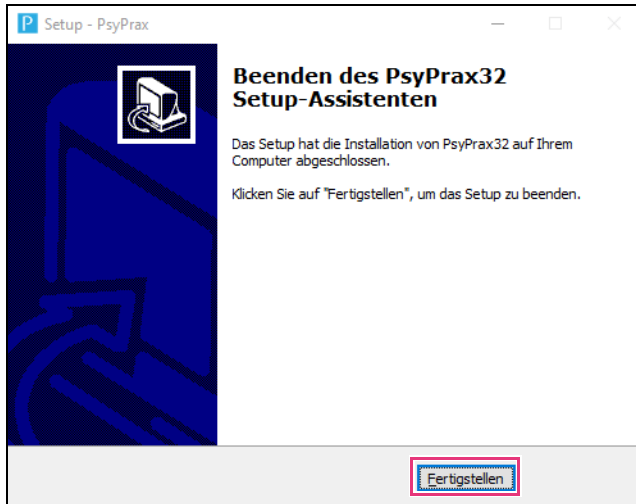


Abbildung 19: Installation fertigstellen

Die Installation ist abgeschlossen. Um das Programm und einzelne Wartungstools schnell und bequem starten zu können, wurde verschiedene Verknüpfungen auf dem Desktop angelegt.

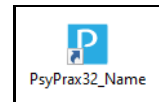


Abbildung 20: Desktop-Verknüpfung